

NISSEI

水銀柱イメージ デジタル血圧計 DM-3000

水銀レス血圧計の世界基準を目指して



point
01

リアル高分解能
水銀イメージ
(バックライト付)

point
02

デジタルでも
しっかり表示

point
03


らくらく
全自動測定

point
04

どこでも
使える設計
(充電式バッテリーバック同梱)


デジタル表示で かんたん読み取り

測定結果はデジタル数値表示でも簡単に読み取り可能。
聴診測定も、血圧保持機能で測定結果の確認が可能。

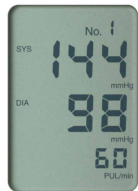

最高血圧
脈圧
最低血圧

3つのパラメータがアナログバー表示で一目で分かる

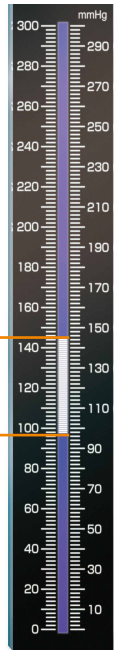

シチュエーションに合わせて選べる2タイプ



標準卓上型



キャリースタンド型
※キャリースタンドは別売です。

専用つまみで かんたん設定

- 腕帯加圧
- 聴診測定
- 全自動測定

専用つまみで簡単に操作可能



サイレント加圧 & ツイン制御弁

加圧時間短縮!!

ツインポンプが加圧時間を短縮し
加圧音も静かに。
又腕周囲に合わせて減圧速度の制御も可能。

主な仕様

販売名	水銀柱イメージ・デジタル血圧計
型式	DM-3000
測定方法	全自動測定：オシロメトリック法 聴診測定：コロトコフ音方式 別途聴診器が必要
測定部位	上腕
表示器	300ドットバー表示 ：ブルー&ホワイトLCD 超高輝度白色バックライト付 ブルーエッジライトスケール板
表示分解能	デジタル表示：10桁数値&キャラクタLCD 1mmHg/dot
圧力範囲	0~300mmHg (腕帯圧力)
測定範囲	最高血圧：50~250mmHg 最低血圧：40~180mmHg 脈拍数：40~160拍/分
精度	圧力：±3mmHg 脈拍数：±5%
加圧	自動 (エアポンプ)
減圧	自動 (電子制御弁)
排気	自動急速排気弁 (電子制御弁)

電源	専用 AC アダプターまたは専用バッテリーパック
消費電力	14W (最大)
メモリー	7回分の測定結果及び平均値 メモリー消去機能付
使用環境	10℃~40℃/相対湿度 30~85% (結露なきこと)
保管環境	-20℃~60℃/相対湿度 10~95% (結露なきこと)
測定可能腕周囲長	全自動測定：レギュラー腕帯：22~32cm ラージ腕帯：32~42cm
聴診測定	：自由 使用する腕帯に依存
寸法	136 (横) × 228 (奥行) × 276 (高さ) mm
重さ	約 1.35kg
付属品	取扱説明書、添付文書、保証書、専用バッテリーパック、専用 AC アダプター、レギュラー腕帯、ラージ腕帯
オプション (別売)	キャリースタンド
医療機器の分類	管理医療機器 特定保守管理医療機器
医療機器認証番号	218AGBZX00052000

断りなく仕様変更する場合がありますのでご了承下さい。

NISSEI

ISO 9001/13485/14001 認証取得

製造販売業者：日本精密測器株式会社
〒377-0293 群馬県渋川市中郷 2508-13
TEL: 0279-20-2311
ホームページ <http://www.nissei-kk.co.jp>

商品に関する問い合わせ・連絡先

お客様相談室 ☎0120-211-164

(9:00~12:00、13:00~17:00 土・日・祝祭日を除く)

<お問い合わせ先>